

**LA BIPEDESTACIÓN AL  
ALCANCE DE LAS PERSONAS**



**MINOS**

Los bipedestadores EasyStand son exclusivos a nivel mundial, ya que son los únicos que permiten ponerse de pie desde la posición de sentado con ayuda de un pistón hidráulico, que facilita de manera notable la labor de los terapeutas y fisioterapeutas, además del ahorro de tiempo que ello supone.

Son los únicos bipedestadores en el mercado que permiten hacer terapia evolutiva con aquellos pacientes que no pueden ponerse totalmente de pie, debido a contracturas, asimetrías, etc.,.




# EASY STAND EVOLV

LA NUEVA GENERACIÓN DE BIPEDESTADORES

"Este nuevo diseño coloca la bipedestación al alcance de las personas"

El equipo de diseñadores de EasyStand, personal especializado y usuarios han desarrollado la base del nuevo EasyStand Evolv. EasyStand Evolv es el bipedestador más modular en el mercado y permite añadir libremente cualquiera de las opciones necesarias.

Su base abierta y el asiento más ancho permiten transferencias más fáciles, de manera independiente o con ayuda de una grúa.

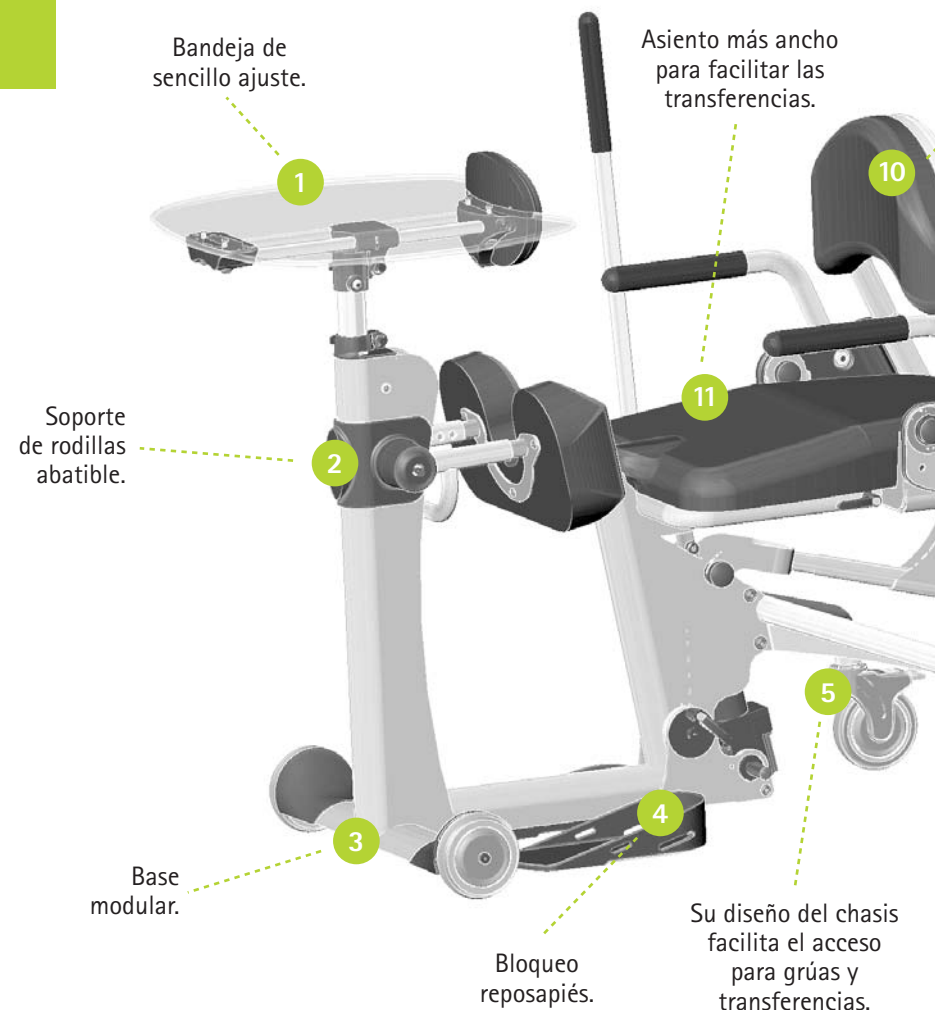

## 10 RAZONES POR LO QUE LA BIPEDESTACIÓN ES NECESARIA:

- 1 · Mejora la gama del movimiento en caderas, rodillas y tobillos.
- 2 · Disminuye el tono y los reflejos anormales del músculo.
- 3 · Reduce puntos de presión al cambiar de posición
- 4 · Mejora las funciones sistémicas.
- 5 · Disminuye la escoliosis progresiva.
- 6 · Estabiliza y previene la pérdida de densidad del hueso.
- 7 · Facilita una postura derecha simétrica natural.
- 8 · Mejora el equilibrio y la fuerza superiores del cuerpo.
- 9 · Alivia el dolor que resulta de estar sentado por un tiempo prolongado.
- 10 · Desarrolla la tolerancia y la resistencia en la posición de pie.

4 opciones de respaldo.

Indicador de ajuste de respaldo.

La ubicación del pivote de cadera minimiza el desplazamiento sobre el plano de contacto.

Maneta de ajuste del ángulo del respaldo.

Ruedas giratorias con freno de 5".

### EASYSTAND EVOLV. Diseñado para levantarse de forma natural.



El punto del pivote del EasyStand Evolv alinea con el pivote de la cadera del usuario.



La línea del cinturón y la línea del hombro del usuario, durante la transición a la posición de pie.



La línea del cinturón y la línea del hombro sigue siendo uniforme después alcanzar la posición de pie completa.

## ESPECIFICACIONES DEL EASYSTAND® EVOLV™

Especificaciones para un EasyStand Evolv talla grande básico

### EASY STAND EVOLV talla grande básico

Altura usuario.	152 - 188 cm.
Peso máximo usuario.	127 kg.
Profundidad de asiento (desde la parte anterior del asiento).	41 - 53 cm.
Distancia de asiento a reposapiés.	41 - 53 cm.
Altura de asiento.	55 cm.
Medida bandeja estándar.	53x61 cm.
Bandeja/Profundidad soporte de tronco.	0 - 25 cm.
Bandeja/Altura soporte de tronco.	39 - 76 cm.
Profundidad soporte de rodillas.	6 - 13 cm.
Anchura soporte de rodillas (centro a centro).	23 cm.
Plataforma reposapiés.	61 x 84 cm.
Peso de la configuración estándar.	49 kg.
Color del chasis.	Gris oscuro.
Color tapizado.	Negro Dartex.

## ACCESORIOS DEL EASYSTAND EVOLV

- Configuración bandeja Shadow Support.
- Configuración Glider.
- Palanca escamoteable.
- Prolongador de palanca Quad Grip.
- Prolongador de palanca en T.
- Opción pies seguros.
- Asiento con cojín Roho.
- Soporte de rodillas independientes con almohadilla Roho.
- Soporte de rodillas independiente.
- Cinturón pélvico.
- Cinturón con hebilla tipo avión.
- Soportes de cadera.
- Accesorio de agarre de mano.
- Bandeja ajustable en ángulo.
- Sujeciones de mano.
- Apoyo de hombros.
- Soporte de tronco anatómico L.
- Cincha pectoral.
- Peto.
- Rueda ajuste ángulo de respaldo.
- Respaldo bajo liso o anatómico.
- Respaldo alto liso o anatómico.
- Soportes de tronco.
- Reposacabezas.
- Soporte Universal lateral.
- Asas de empuje.
- Medidor del ángulo.
- Accesorios Mounting Bracket/Soporte Universal de cabeza.



### EASYSTAND EVOLV BÁSICO MODULAR

Ruedas giratorias, sistema hidráulico manual, asiento anatómico, soporte de rodillas abatible, reposapiés ajustables, bandeja con soporte de tronco, reposabrazos y tapicería Dartex®.



### EASYSTAND EVOLV CON BANDEJA SHADOW SUPPORT

Incluye una bandeja abatible con un soporte de tronco anatómico que permanece a la altura del usuario en todas las posiciones desde sentado hasta de pie. Se necesita respaldo.

Mostrado con opción respaldo anatómico y soporte de rodillas independiente.



### EASYSTAND EVOLV CON GLIDER

Proporciona una bipedestación activa a través de la parte superior del tronco y el movimiento de la parte inferior. Con bandeja y soporte pectoral pequeño, asas, cilindros de resistencia regulables, soporte de rodillas abatible y plataforma de reposapiés ajustables.

Mostrado con opción respaldo anatómico.

## ¿QUÉ ES GLIDER?

Proporciona una bipedestación activa a través de un fortalecimiento de la parte superior del cuerpo y el movimiento de la parte inferior.



Su EasyStand Evolv puede pedirse con la opción Glider o usted puede añadir la configuración del Glider más tarde.



El diseño del chasis permite el acceso de varios tipos de grúas.

# MAGICIAN EI

PARA LAS EDADES MÁS TEMPRANAS

Para los  
más pequeños  
línea MAGICIAN.

Es un bipedestador vertical, un pupitre escolar, una silla con inclinación anterior y un bipedestador supino que permite su utilización desde edades más tempranas a niños desde 71 cm de altura.

## ¿QUIÉN UTILIZA MAGICIAN EI?

- Niños con parálisis cerebral, Espina Bífida, Distrofia Muscular, etc.
- Niños en intervención precoz durante la enseñanza primaria.

## ¿DÓNDE UTILIZARLO?

- En Casa.
- Centros de Día.
- Centros de Intervención Precoz.
- Escuelas y Hospitales para niños.



## MAGICIAN EI

Altura usuario.	71 - 102 cm.
Peso máximo usuario.	20 kg.
Profundidad de asiento.	16-28 cm.
Altura de asiento.	48 cm.
Anchura de asiento.	11 - 24 cm.
Distancia asiento a reposapiés.	8 - 38 cm.
Profundidad hasta la mesita o apoyo pectoral.	13 - 15 cm.
Altura de la mesita.	27 - 56 cm
Distancia de ajuste apoyo rodillas.	9 - 25 cm.
Ajuste anchura apoyo rodillas.	11 - 20 cm.
Altura respaldo desde el asiento.	28 - 32 cm.
Dimensiones de la base.	56x84 cm.
Peso de configuración standard.	34 kg.
Color de la estructura.	Epoxi negro.
Color de la tapicería standard.	Azul.
Color del asiento apoyardillas, respaldo y reposacabezas.	Nylon, neopreno negro.
Tamaño de la mesita standard.	51 x 56 cm.
Altura de reposacabezas en el asiento.	33 - 55 cm.

# 7000 MAGICIAN

PARA LAS EDADES MÁS TEMPRANAS

Es un sistema de bipedestación que permite estar colocado en cualquier posición desde sentado hasta de pie, además es una silla de posicionamiento postural y un pupitre de trabajo. Diseñado para niños desde 91 cm de altura.

Ajustable, permite su utilización por usuarios múltiples.

## ¿QUIÉN UTILIZA MAGICIAN?

- Niños con parálisis cerebral, Espina Bífida, Distrofia.
- Muscular, etc. Niños con contracturas que no pueden mantenerse en pie.

## ¿DÓNDE UTILIZARLO?

- En Casa.
- Centros de Día.
- Centros de Fisioterapia.
- Escuelas y Hospitales para niños.



### 7000 MAGICIAN

Altura usuario.	91 - 137 cm.
Peso máximo usuario.	45 kg.
Profundidad de asiento.	28 - 43 cm.
Altura de asiento.	48 cm.
Distancia asiento a reposapiés.	20 - 38 cm.
Profundidad hasta la mesita.	13 - 16 cm.
Distancia de ajuste apoyo rodillas.	9 - 27 cm.
Ajuste anchura apoyo rodillas.	14 - 22 cm.
Altura respaldo desde el asiento.	28 cm.
Ajuste en anchura de los soportes de cadera.	16 - 31 cm.
Dimensiones de la base.	56x85 cm.
Peso de configuración standard.	34 kg.
Color de la estructura.	Epoxi negro.
Tamaño de la mesita standard.	51x57 cm.
Dimensiones de la mesita (7500 unidad móvil).	38x51 cm.

## OPCIONES MAGICIAN

80636		Cincha de pie par.
80615		Opciones pies seguros (reemplaza cincha).
51501		Cinturón pélvico.
51601		Cincha pectoral pequeña.
80631		Peto: Pequeño.
80632		Peto: Mediano.
7020		Apoyo tronco par.
7030		Reposacabezas.
80642		Soporte reposacabezas universal.
7050		Asas de empuje acompañante.
7060		Opción sin mesita para 7500.
80246		Medidor del ángulo del respaldo.
7500		Opción móvil.
		Gama de colores: Rojo rubi, Azul royal y Amarillo.

# 5000 JOVEN

## PARA LOS MÁS JÓVENES

Es un bipedestador y un escritorio de mesa diseñado para jóvenes en crecimiento desde 122 cm de altura.

### ¿QUIÉN UTILIZA 5000 JOVEN?

- Personas con parálisis cerebral, Espina Bífida, Distrofia Muscular, Lesión Cerebral Traumática o en la Médula Espinal, etc.
- Cuidadores que mueven a niños de más peso.

### ¿DÓNDE UTILIZARLO?

- En Casa.
- Centros de Educación.
- Centros de Fisioterapia.
- Escuelas y Hospitales para niños.



#### 5000 JOVEN

Altura usuario.	122 - 168 cm.
Peso máximo usuario.	82 kg.
Profundidad de asiento.	41 - 61 cm.
Altura de asiento.	49 cm.
Distancia asiento a reposapiés.	28 - 48 cm.
Altura de la mesita.	31 - 66 cm.
Profundidad de ajuste apoyo rodillas.	8 - 13 cm.
Anchura de ajuste apoyo rodillas.	20 cm.
Dimensiones de la base.	68x84 cm.
Peso de configuración standard.	55 kg.
Color de la estructura.	Epoxi negro.
Tamaño de la mesita negra.	49x51 cm.
Dimensiones de la mesita (7500 unidad móvil).	51x63 cm.

### OPCIONES 5000 JOVEN

5062		Ruedas de freno (set de 4).	5200 5200Y		Opción movilidad.
5020		Palanca escamoteable.	5022		Prolongador de palanca.
80616		Opción pies seguros (reemplaza cincha).	5026 5026Y		Apoyo rodilla ajustable de manera independiente.
5041		Mesita transparente (para 5000Y).	5040		Mesita transparente grande.
5250		Opción sin mesita (para 5200Y).	5030		Apoyo antebrazo (para 5040).
5024		Opción mesita abatible (para 5200Y).	5100 5100Y		Opción respaldo.
5100R 5100YR		Respaldo escamoteable.	5150		Opción respaldo alto con cincha pectoral grande.
5038		Apoyo caderas par (para 5000).	5038Y		Apoyo caderas par (para 5000Y).
5036		Apoyo tronco par.	5030		Apoyo antebrazo (para 5040).
5032		Reposacabezas.	5034		Retractor de los hombros (solo con 5150).
80643		Soporte reposacabezas universal.	80246		Medidor del ángulo del respaldo.
Cincha pectoral.		51601 Pequeña.	Peto		80631 Pequeño.
		51600 Grande.			80632 Mediano.
51500		Cinturón pélvico.			80633 Grande.

# OVATION STAND

**LA INCORPORACIÓN DESDE LA SILLA DE RUEDAS**

Es un bipedestador con correa que levanta directamente al individuo desde la silla de ruedas y permite a las personas incorporarse a una posición erguida.

## ¿QUIÉN UTILIZA OVATION?

- Adultos con lesión en la médula espinal, esclerosis múltiple, lesión cerebral traumática, espina bífida, infarto, etc.
- Individuos bariátricos.
- Personas con dificultad en la transferencia.

## ¿DÓNDE UTILIZARLO?



- En Casa y en el Trabajo.
- Hospitales e instalaciones de Rehabilitación.
- Unidades de Cuidado prolongado.
- Residencias y Hogares Comunitarios.



EasyStand

### OVATION

Altura usuario.	152 - 195 cm.
Peso máximo usuario.	127 kg.
Tamaño de la cincha grande.	30x71 cm.
Tamaño de la cincha pequeña.	23x66 cm.
Altura de apoyo rodillas desde reposapiés.	37x50 cm.
Anchura apoyo de rodillas.	26 cm.
Tamaño apoyo rodillas.	23x39 cm.
Profundidad hasta el apoyo pectoral.	9 - 27 cm.
Altura de la mesita desde el reposapiés.	104 - 127 cm.
Anchura interior (acceso desde silla de ruedas).	58 cm.
Dimension de la base.	80x70 cm.
Peso de configuración standard.	61 kg.
Tamaño de la mesita standard.	50x51 cm.
Color de la estructura.	Negro, blanco y granate.
Color de tapicería.	Gris grafito.

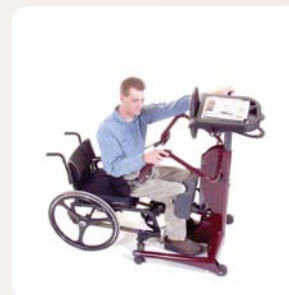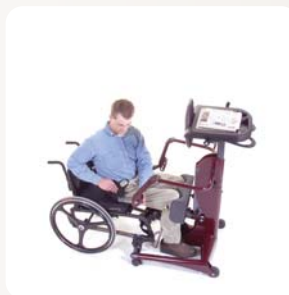

Pol. Ind. Sangróniz  
Iberre Kalea, 7  
48150 SONDIKA (España)

**TEL.** +34 94 453 32 30  
**FAX** +34 94 453 30 01

**E-MAIL** [pedidos@minos97.com](mailto:pedidos@minos97.com)  
**WEB** [www.minos97.com](http://www.minos97.com)



**MINOS**